


เครื่องทำน้ำกลั่น Water Still รุ่น WCS Series ยี่ห้อ FAVORIT ประเทศมาเลเซีย

Water Still , Water Distillation เครื่องกลั่นน้ำ เครื่องทำน้ำกลั่น รุ่น WCS Series เป็นเครื่องกลั่นน้ำแก้วแบบกลั่นครั้งเดียว เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ โรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ฯลฯ

คุณสมบัติของ เครื่องกลั่นน้ำแก้ว

- เครื่องทำน้ำกลั่น รุ่น WCS Series เป็นเครื่องกลั่นน้ำแก้วแบบกลั่นครั้งเดียว
- ตัวบอยเลอร์ทำจากแก้ว Borosilicate Glass Type 3.3 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนสูง
- ฮีตเตอร์หุ้มด้วยซิลิกา ให้กำลังไฟสูงถึง 1500 วัตต์ จำนวน 2 แท่ง
- น้ำกลั่นที่ได้มีค่าการนำไฟฟ้า 1-2 ไมโครซีเมนต์
- ตัวเครื่องมีโครงสร้างที่กะทัดรัด จึงเหมาะกับการตั้งโต๊ะ หรือ แขนงผนัง
- บริเวณข้อต่อที่เป็นเกลียว ช่วยให้การประกอบเครื่องหรือการถอด ง่ายและปลอดภัยขึ้น
- มีตัววัดระดับน้ำอยู่ในตัวเครื่องพร้อมวาล์ว Vendura-Nova สำหรับระบายน้ำ ทำให้ปรับระดับได้สะดวกโดยไม่ต้องถอดออก
- มีการป้องกันอุณหภูมิเกินในตัวให้ความร้อน ช่วยป้องกันความเสียหาย เนื่องจากน้ำไม่เข้าเครื่องกลั่น และสามารถกลั่นได้อัตโนมัติเมื่อมีน้ำเข้าเพียงพอ
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

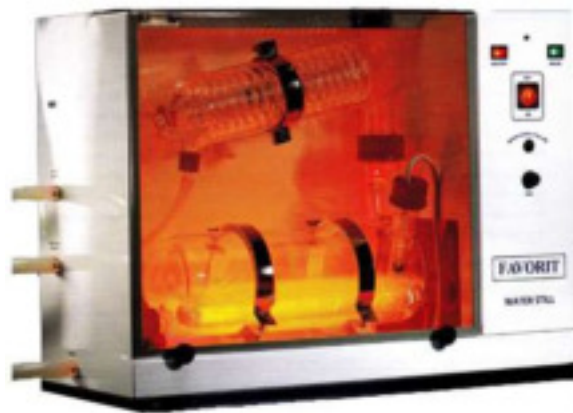

Model	WCS4L	WCS8L
Distilled Water Capacity	4 L / hour	8 L / hour
Heater	2 x 1.5 kW Silica heater	2 x 1.5 kW Silica heater
Reservoir capacity	1 L / minute	1 L / minute
Safety Device	Over temp limiter.	Over temp limiter.
Electric Supply	220V, 50/60 Hz	220V, 50/60 Hz
Dimensions	225 x 550 x 395 mm.	145 x 463 x 447 mm.
Weight	7.2 Kg	30 Kg