


ประตูวัดอุณหภูมิอินฟราเรด Infrared Thermometer Door รุ่น SA200D ยี่ห้อ Securina

ประตูวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด รุ่น SA200D ประตูตรวจจับอุณหภูมิอินฟราเรด ผ่านเทคโนโลยี การตรวจจับอุณหภูมิพื้นผิวอินฟราเรดแบบไม่สัมผัสที่ไม่ซ้ำใคร สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ และตรวจจับอุณหภูมิพื้นผิวของบุคคลผ่านเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความแม่นยำสูง นำเข้าจากเบลเยียม

Thermometer Door มีฟังก์ชันการเตือนด้วยเสียงเมื่ออุณหภูมิร่างกายผิดปกติ สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคขนาดใหญ่และกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบอุณหภูมิในเรือนจำศาล โรงเรียน โรงพยาบาล ธนาคารอาคาร บริษัท อิเล็กทรอนิกส์พอร์ต สถานีผู้โดยสาร ห้องโถงนิทรรศการ ศูนย์ประชุม งานเฉลิมฉลองสำคัญ คอนเสิร์ต และสถานที่อื่น ๆ

คุณสมบัติของ เครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น SA200D

- ระยะการวัด 5 - 30 mm
- ตรวจวัดความสูงไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร
- หน้าจอ LED แสดงอุณหภูมิที่ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์
- ส่วนประกอบระดับไฮเอนด์ : เครื่องตรวจจับอินฟราเรด Melexis ดั้งเดิม นำเข้าจากเบลเยียม ความแม่นยำสูงประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียรและคุณภาพที่เชื่อถือได้
- การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ : เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดในร่างกายแบบไดนามิก ที่มีความแม่นยำสูง ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 24 ชั่วโมง
- เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดคงที่ สามารถวัดอุณหภูมิของข้อมือมนุษย์หรือหน้าผาก
- การแจ้งข้อมูลเสียง 2 รูปแบบ คือ
 - อุณหภูมิของคุณเป็นปกติ
 - โปรดตรวจสอบอุณหภูมิอีกครั้ง และไฟแสดงสถานะ LED สีแดงสำหรับการเตือนอุณหภูมิผิดปกติ
- การวัดอุณหภูมิสามารถตรวจวัดได้ตั้งแต่อุณหภูมิ -10°C
- การออกแบบป้องกันการกระแทก : สามารถตรวจวัดได้อย่างแม่นยำภายใต้การสั่นของลมแรง
- วัสดุทำจาก SPCC, แผงประตู PVC และกรอบโลหะและกล่องหลักโลหะ
- การเตือนอุณหภูมิเท็จ ป้องกันอุณหภูมิสูงจากสภาพแวดล้อม : โปรแกรมการวัดอุณหภูมิอัจฉริยะสูง STM สามารถป้องกันการเตือนที่ผิด
- พลาตที่เกิดจากอุณหภูมิสูงและแสงแดดโดยตรง

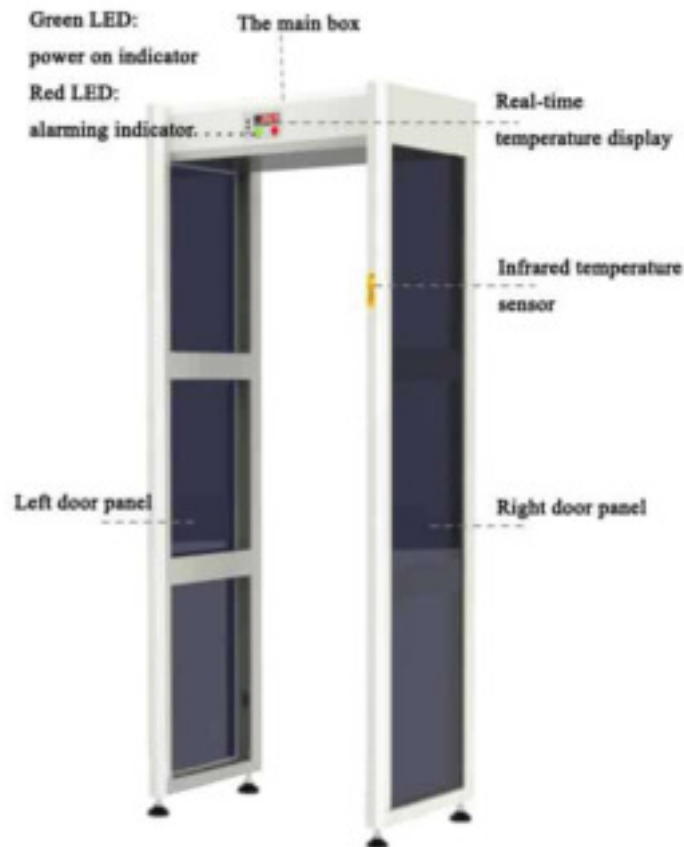

Infrared Thermometer Door รุ่น SA200D

Model	SA200D
Warranty	2 Years Warranty and 10 Years Parts Supply Availability
Display	Green/Red LED light indicators, small LED display
Electrical current	AC100V~240V 50/60Hz
Power	<10W
Work environment	-10°C~+40°C
Work humidity	0-95%, Non-condensing
Outer frame	2060mm (h)*820mm (w)*500mm (d)
Inner frame	1900mm (h) *700mm (w)*500mm (d)
Material	Main box and frame: Metal ; Panels: SPCC, PVC
Gross Weight(unit)	50kgs
Packing size(Door frame)	2100mm(L)*610mm(W)*170mm(H) / 39kgs
Packing size(Main Box)	750mm(L)*210mm(W)*460mm(H) / 11kgs